




PRESTO  
Transportní vozík

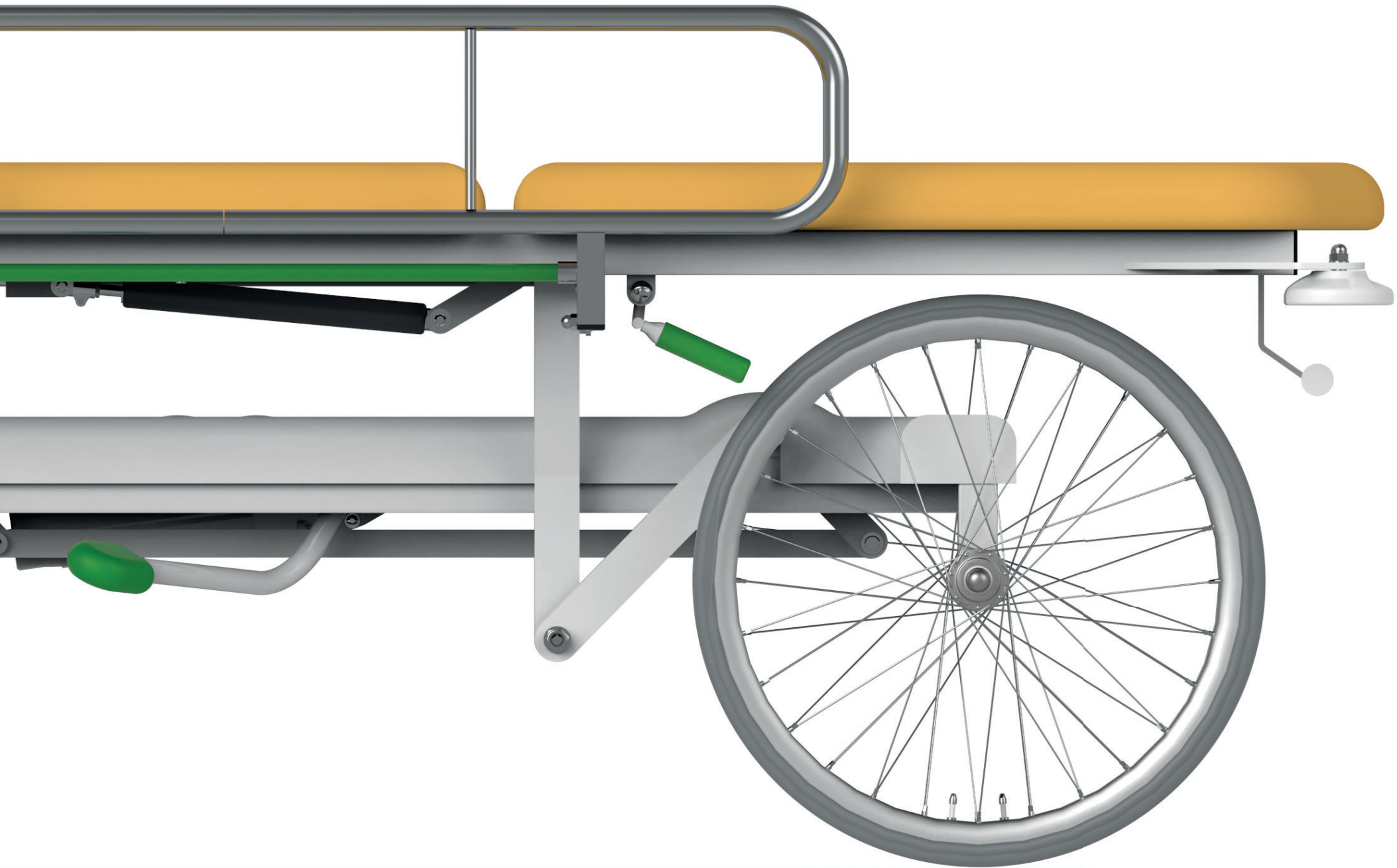

## PRESTO

Transportní vozík PRESTO je určen pro transport imobilních pacientů. Ergonomické a intuitivní ovládání umožňuje okamžité použití všech funkcí. Velká kolečka a lehká konstrukce zajišťují vysokou mobilitu a snadnou manipulaci.




## Vysoká nosnost

Pevná a robustní konstrukce s nosností až 230 kg tvoří bezpečnou oporu při péči o pacienta.



## Matrace ze zdravotnické koženky

Ložná plocha je tvořená matrací ze zdravotnické koženky. Koženka má antistatickou úpravu, která je antibakteriální a má vynikající antimikrobiální účinky.

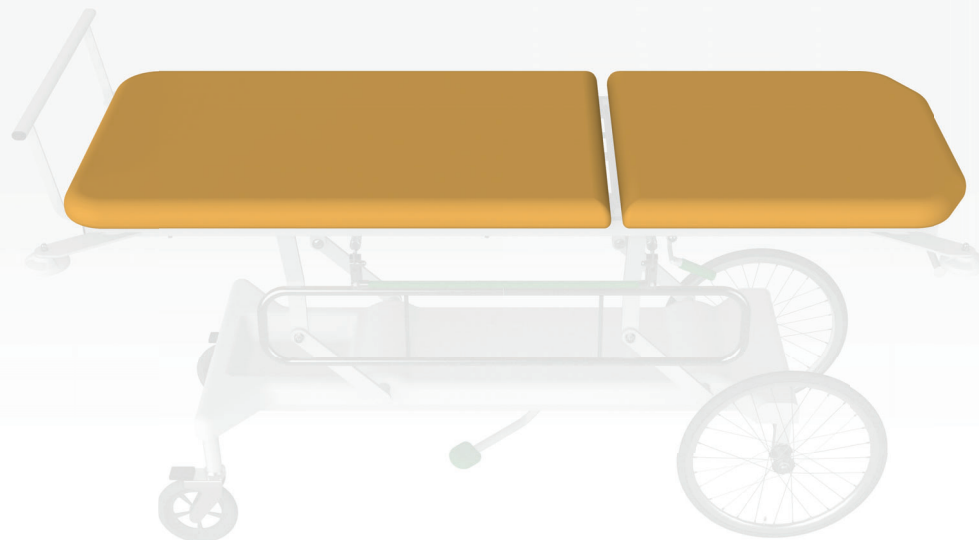



## Možnost volby barevného provedení

Možnost volby barevného designu koženky lehátka umožňuje pacientům a personálu vytvořit estetický a příjemný prostor, který může pomoci ke zlepšení nálady, komfortu a snížení stresu.



## Jednoduché nastavení výšky

Zdvih ložné plochy je ovládán snadno ovladatelným nožním pedálem přístupným z obou stran.

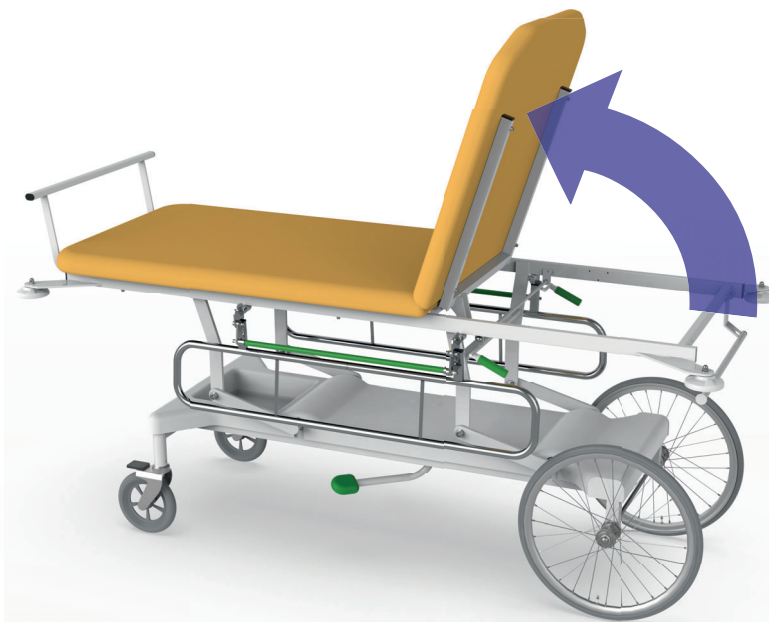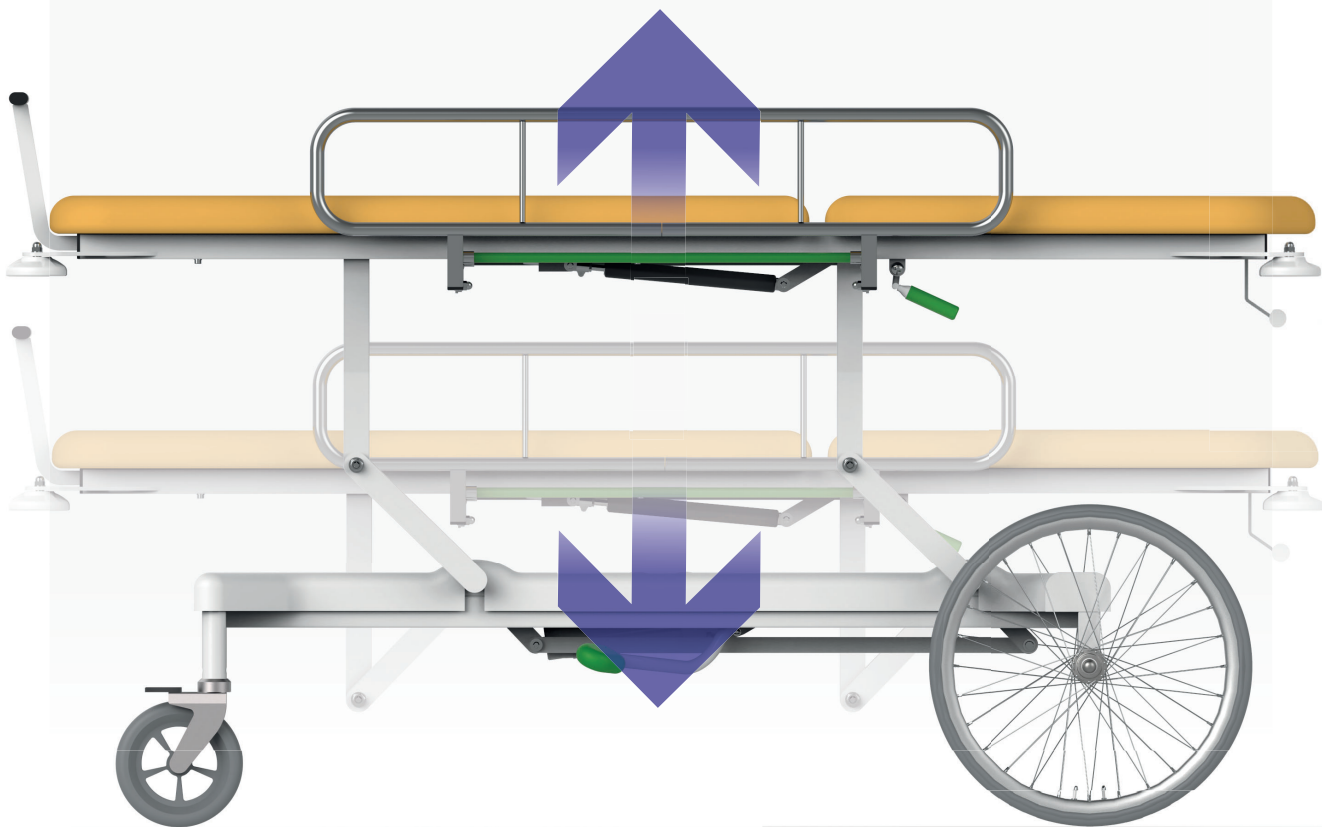



## Polohování zádového dílu

Polohování zádového dílu lehátka je díky plynové pístnici snadno a lehce ovladatelné.

## Odklopné postranice


Ochranné postranice podél ložné plochy lze jednoduchým způsobem odklopit a zajistit tak okamžitý přístup k pacientovi.

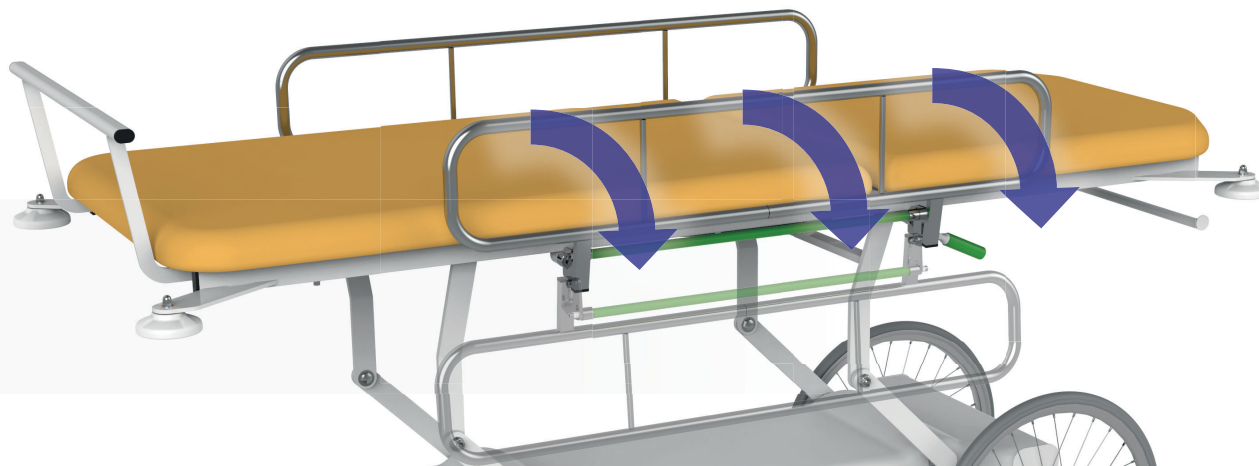

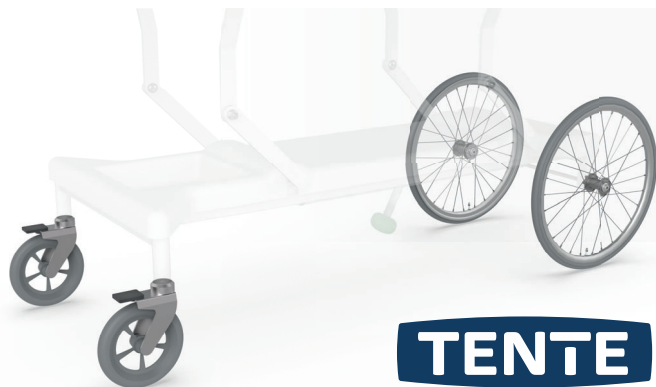


### Kolečka

Kvalitní zdravotnická kolečka TENTE snižují fyzickou námahu ošetřujícímu personálu při transportu a manipulaci. Kolečka jsou vyrobena ze stálého neznačujícího materiálu.

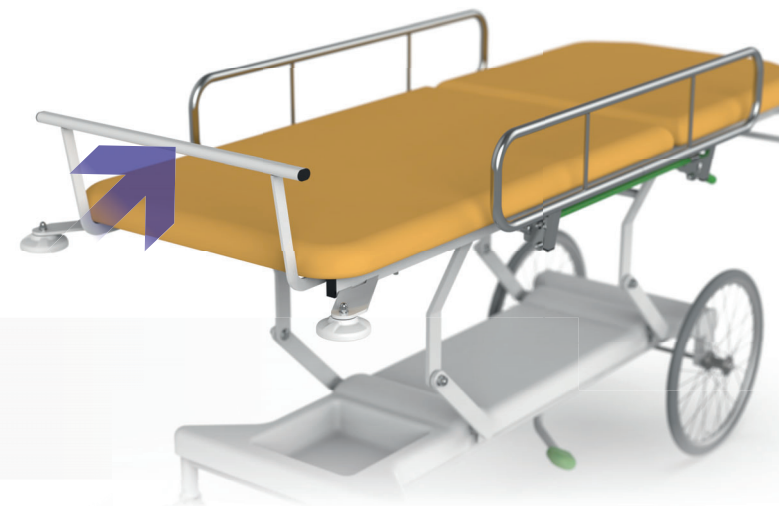


### Transportní madlo v nožní části

Pro snadný transport pacienta je vozík vybaven madlem v nožní části.

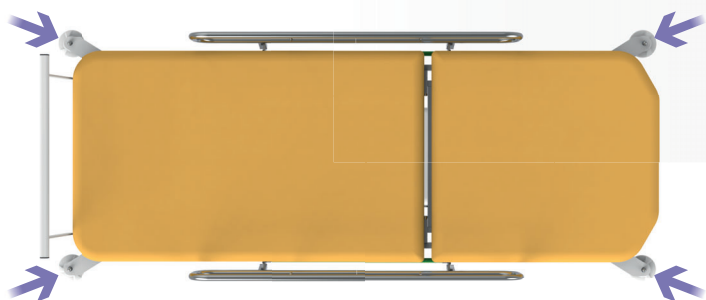

### Nárazová kolečka

Nárazová kolečka, která mohou být umístěna v rozích ložné plochy, jsou skvělým pomocníkem zejména při transportu.

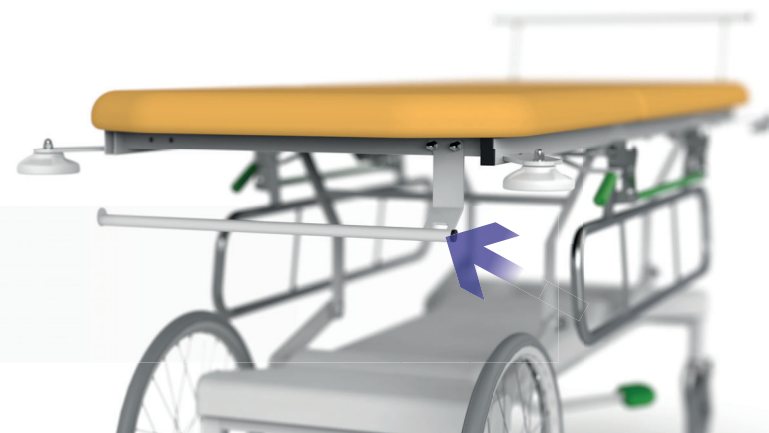

### Držák role papíru

Držák pod ložnou plochou pro uchycení hygienického papíru.


### Odkládací prostor


Osobní věci pacienta nebo nezbytné příslušenství mohou být uloženy v prostoru pod ložnou plochou.



### Plastový kryt podvozku

Plastový kryt usnadňuje a urychluje každodenní čištění vozíku. Zároveň chrání mechanismy podvozku, čímž se prodlužuje životnost jednotlivých komponentů.

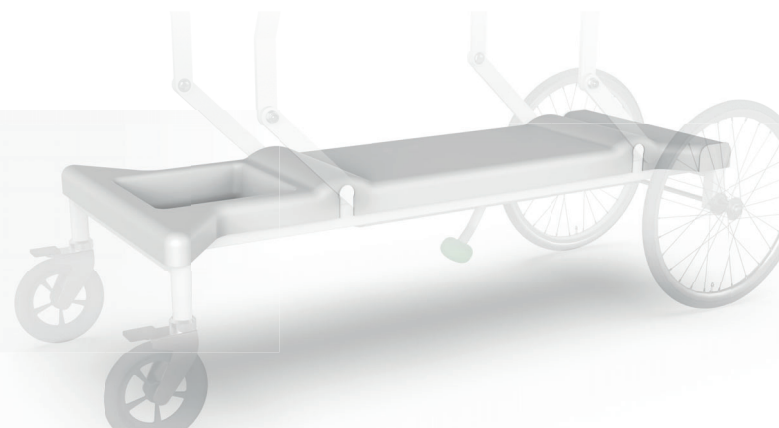

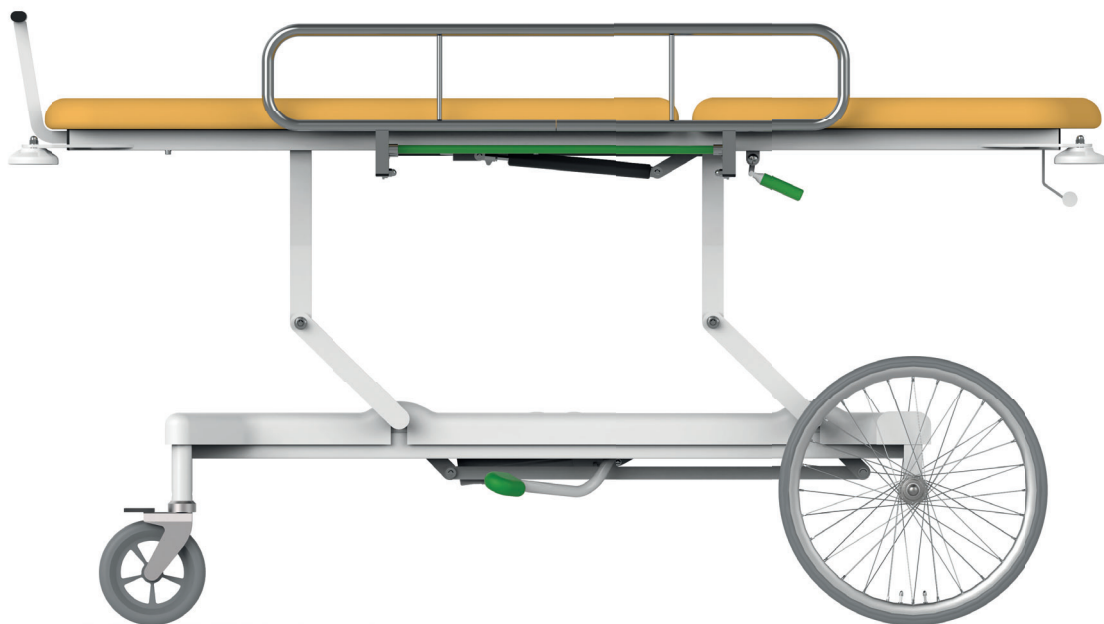

## Technické parametry

|  |             |                              |                                 |
|--|-------------|------------------------------|---------------------------------|
| Vnější rozměry přes nárazová kolečka (délka x šířka) ..... | 208 x 88 cm | Typ postranice .....         | Odklopné, nerezové              |
| Rozměry ložné plochy (délka x šířka) .....                 | 200 x 72 cm | Kolečka .....                | Kovová, bantamová, drátová      |
| Výška ložné plochy .....                                   | 57 - 94 cm  | Materiál ložné plochy .....  | Čalouněná, zdravotnická koženka |
| Polohování zádového dílu .....                             | 0 - 85°     | Plastový kryt podvozku ..... | Ano (volitelně)                 |
| Bezpečné provozní zatížení .....                           | 230 kg      | Držák role papíru .....      | Ano (volitelně)                 |
| Maximální hmotnost pacienta .....                          | 195 kg      | Transportní madlo .....      | Ano (volitelně)                 |
| Hmotnost .....   | 90 kg       | Nárazová kolečka .....       | Ano (volitelně)                 |

