




TITAN

Bariatrické lôžko

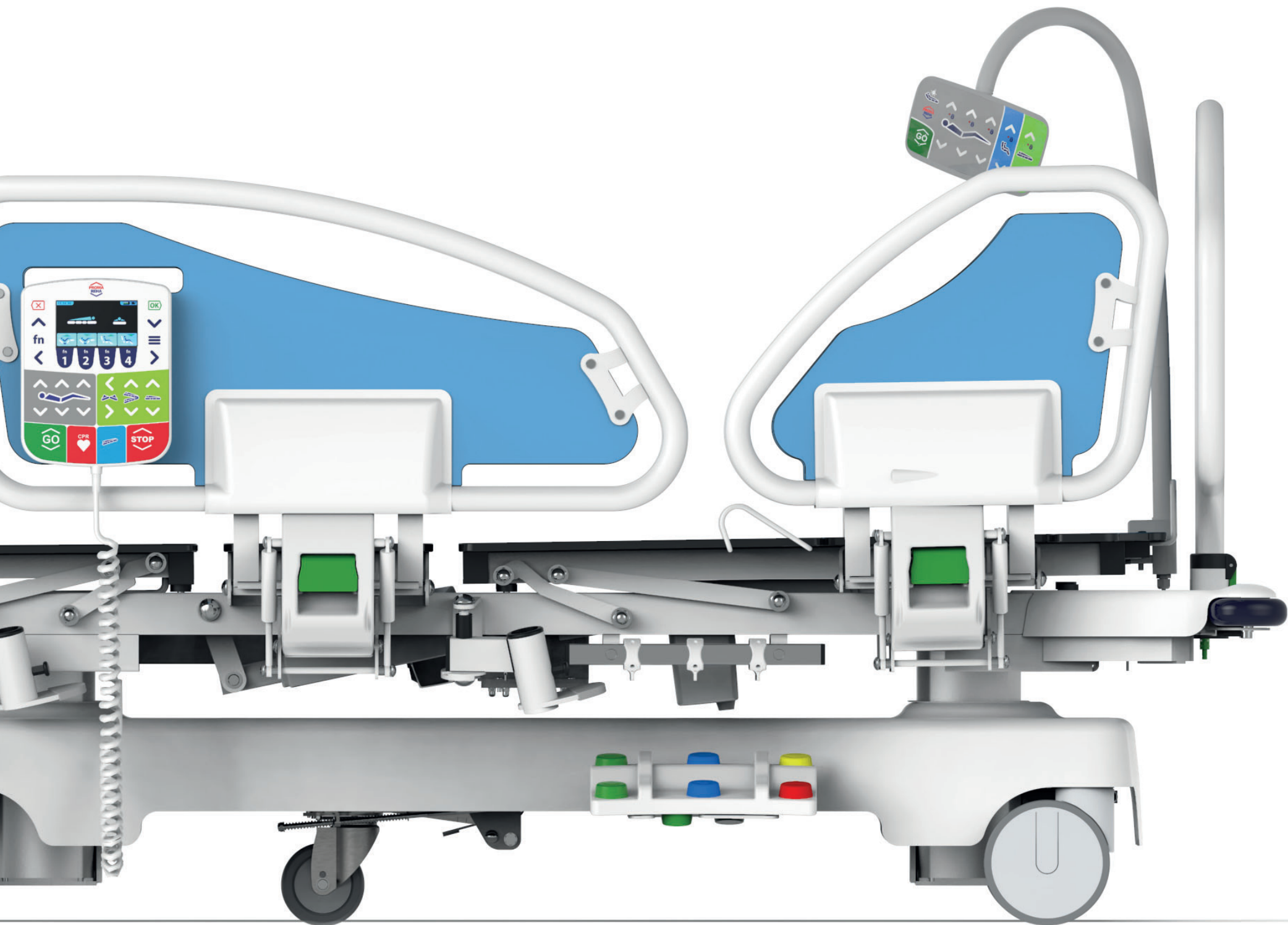


TITAN

Bariatrické lůžko určené pro standardní, nadstandardní i intenzivní nemocniční péči

Toto lůžko by jen těžko hledalo konkurenci. Bezpečnost pro pacienta i personál zajišťuje robustní a odolný ocelový rám, díky kterému dosahuje nosnost lůžka 500 kg (1100 liber). Pevná a stabilní konstrukce byla navržena materiálově i technologicky do posledního detailu. Samozřejmostí jsou i nadstandardní funkce, které umožňují komfortní péči o bariatrické pacienty.




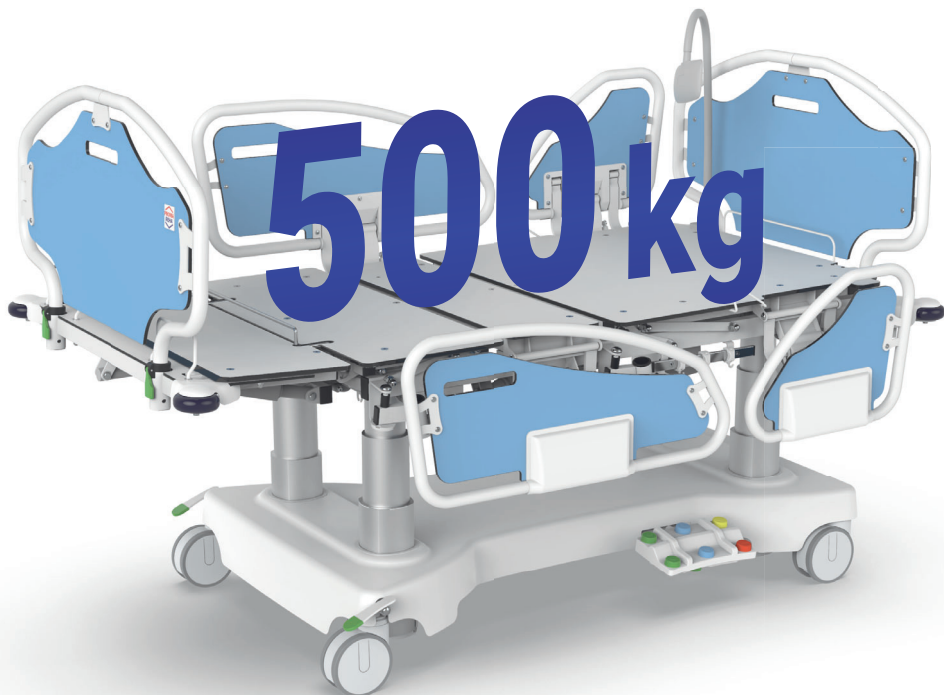


Bezpečné provozní zatížení 500 kg

Protože je pro nás bezpečnost na prvním místě je lůžko stabilní i při zatížení až 500 kg. Personál i pacienti ocení použití kvalitních materiálů a technologií, díky kterým je zajištěna extrémně vysoká životnost.


Šířkové varianty

Abychom vyhověli požadavkům a možnostem našich zákazníků, nabízíme lůžko ve dvou šířkových variantách a to 100 a 120 cm. Pokud to umožňuje dispozice interiéru, doporučujeme vždy volit šířku 120 cm.

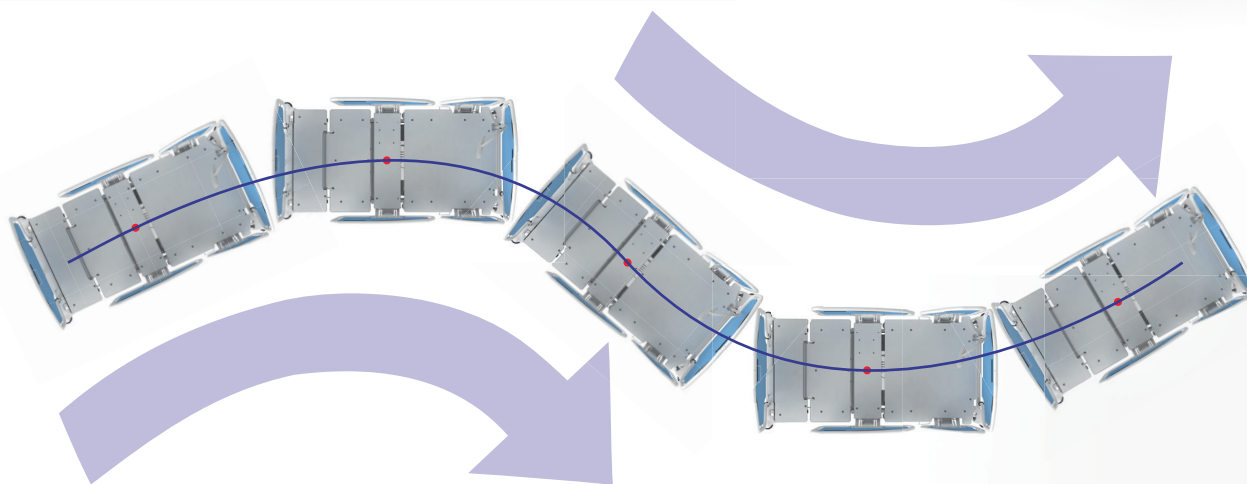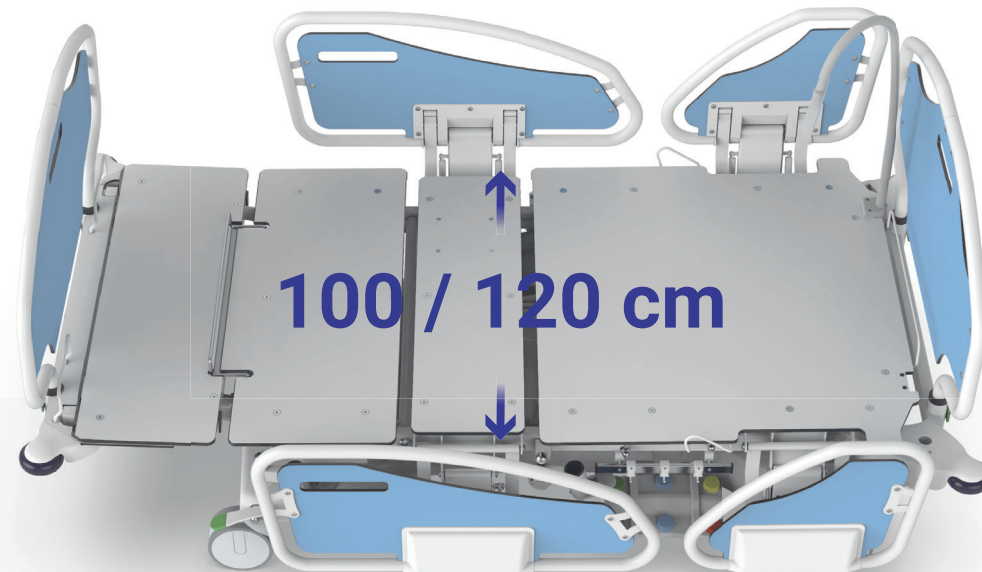

Páté kolečko

Díky pátému kolečku je zajištěna snadná a intuitivní manipulace s lůžkem. Tuto funkci oceníte zejména v členitých prostorách a při manipulaci s lůžkem jednou osobou.

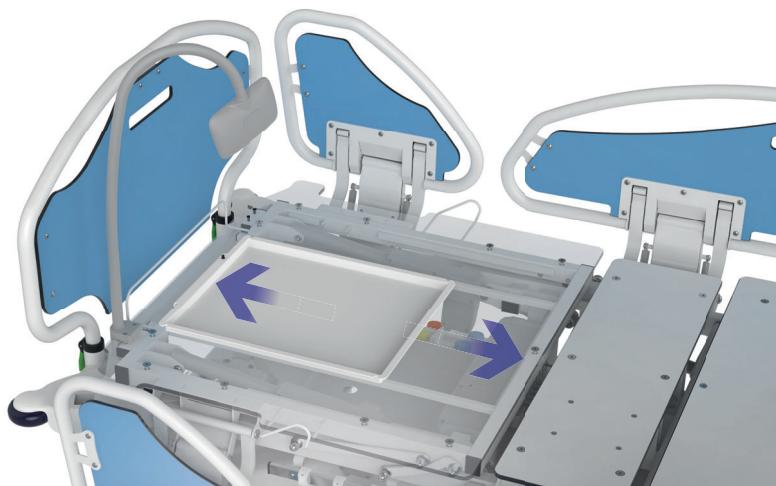


Rentgenovatelná ložná plocha

Konstrukce ložné plochy umožňuje komfortní a bezpečné snímání pomocí klasických RTG přístrojů přímo na lůžku. Díky tomu lze provádět některá specializovaná vyšetření či zákroky přímo na lůžku bez nutnosti přesunu pacienta.

Ložná plocha HPL

Ložná plocha lůžka z vysokotlakého laminátu je ideální oporou pro antidekubitní matraci a jistotou nejlepší volby pro snadnou údržbu.

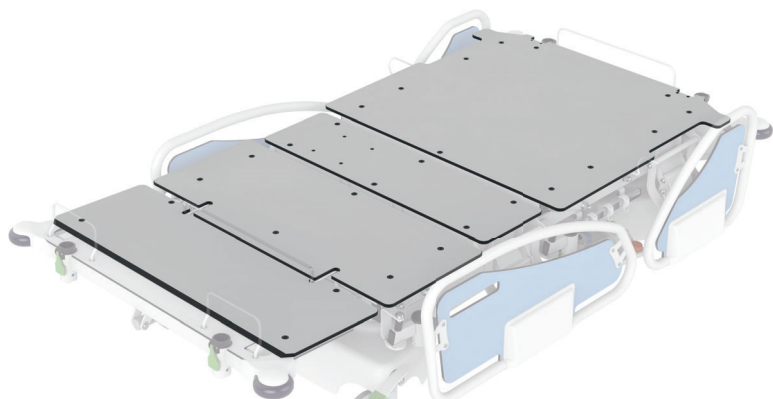

Vážicí systém (TITAN PRO)

Lůžka lze vybavit kalibrovaným a certifikovaným automatickým vážicím systémem s možností jednoduchého nastavení vážicích režimů, vyhodnocování naměřených hodnot a zobrazování výsledků pomocí grafů.





Nožní ovladače

Lůžko je vybaveno nožními ovladači s tlačítky pro zdvih ložné plochy, laterální náklon, vyšetřovací polohu a CPR. Ovladač je doplněn o bezpečnostní aktivní tlačítko umístěné ze spodní strany.

Unikátní lůžko s nosností 500 kg

Snadno odnímatelná čela

S bezpečnostním zámekem

Záložní baterie

Elektrické CPR

Sesterský ovladač s LCD

Univerzální držák příslušenství

Odolné kovové postanice po celé délce lůžka





Rentgenovatelná ložná plocha

Pomocí klasických RTG kazet

Značková kolečka TENTE

150 mm plastová s centrální brzdou

Eurolišta

Pro zavěšení doplňkového vybavení


Podsvícení podvozku


Intuitivní ovladače s barevně rozlišenými funkcemi




Přímá vystupovací poloha

Nedocenitelným přínosem pacientům i ošetřujícímu personálu je přímá vystupovací poloha, která přináší možnost vystoupení pacienta z lůžka nožním čelem. Unikátní konstrukce umožňuje nastavit ložnou plochu do polohy křesla, které je maximální oporou pacienta při vystupování z lůžka. Jde o nejbezpečnější způsob vstávání a usedání bariatrických pacientů, který snižuje fyzickou námahu pacientovi i ošetřujícímu personálu. Pacient se během vstávání nemusí přetáčet na bok lůžka.

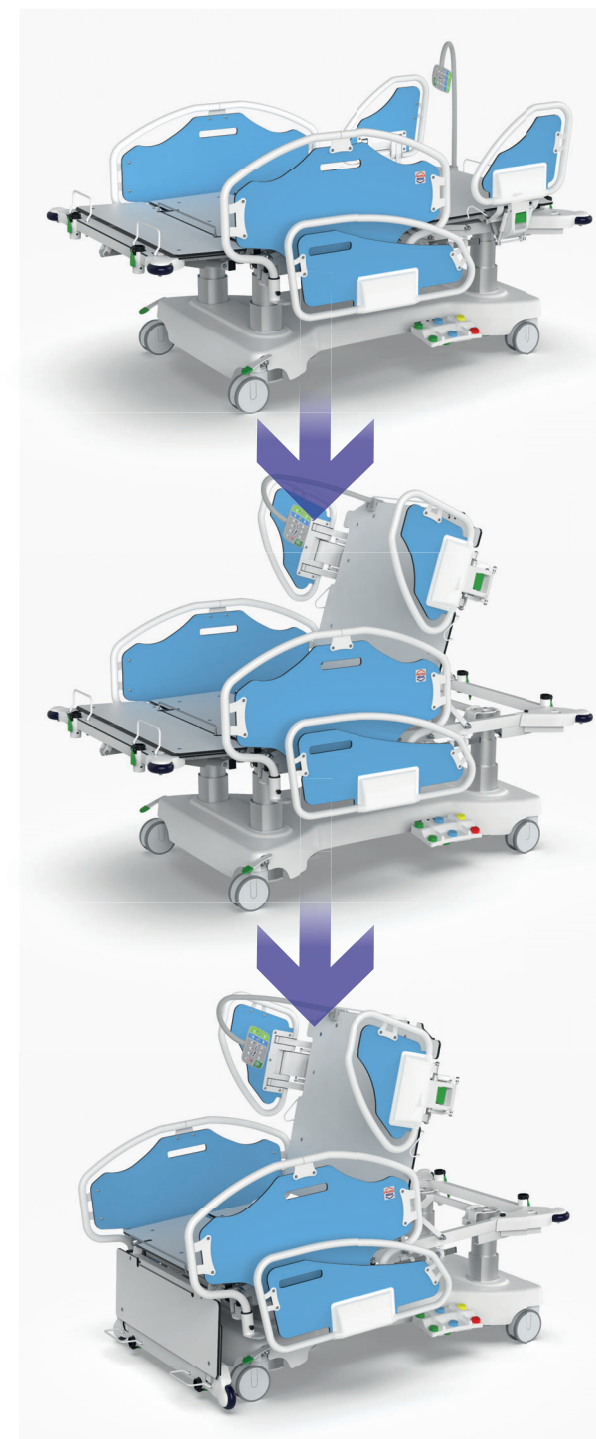

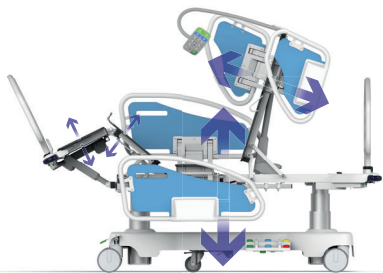

Plně elektrické ovládání

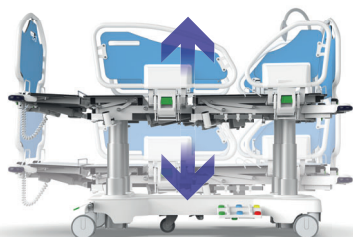

Výška ložné plochy 45 cm - 85 cm




Laterální náklon




Trendelenburg / Antitrendelenburg

Elektrické prodloužení lůžka o 20 cm

Elektrické prodloužení ložné plochy až o 20 cm
přináší pohodlí i vyšším pacientům.

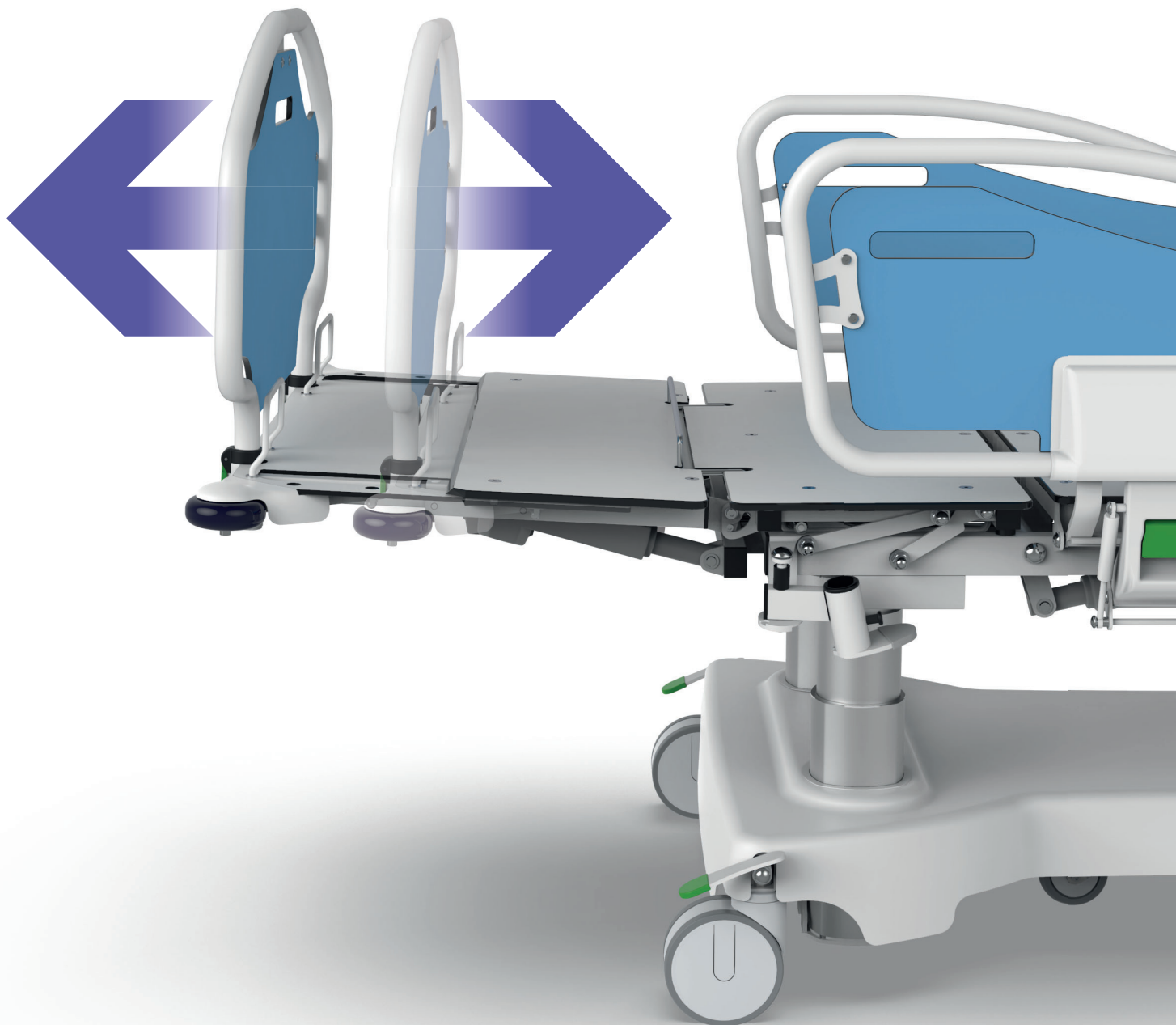


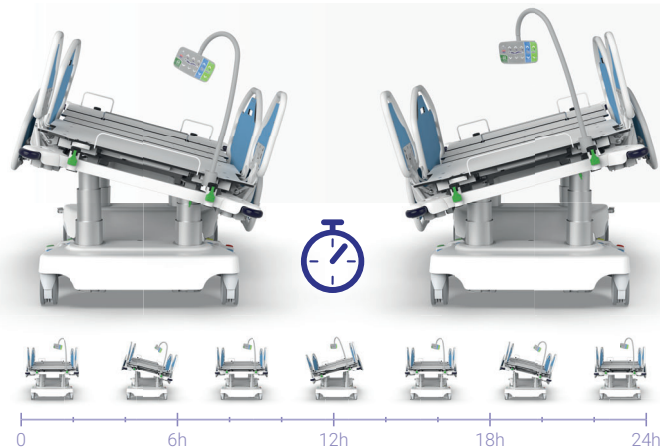


Automatická laterální terapie

Je významným přínosem zejména pro pacienty s vysokým rizikem vzniku pooperačních respiračních komplikací a dekubitů.

Dvojitá autoregrese

Přináší pacientům vyšší komfort, redukuje tlaky v břišní oblasti a snižuje riziko vzniku dekubitů.

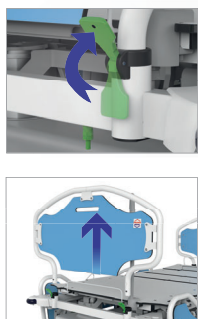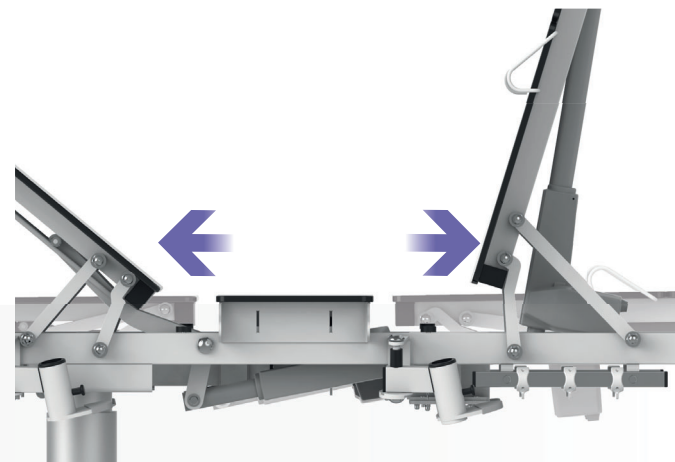

Rychlý přístup k pacientovi

RRS (Rapid Remove System) odnímání čel výrazně urychluje přístup k pacientovi v kritických okamžicích.


Stabilní čtyřsloupová konstrukce

Při vývoji jsme kladli důraz na bezpečnost, stabilitu a nosnost a proto jsme zvolili čtyři elektrické motory pro zdvih ložné plochy.




Centrální brzda


Bezpečná manipulace s lůžkem je zajištěna pomocí centrálně ovládané brzdy.

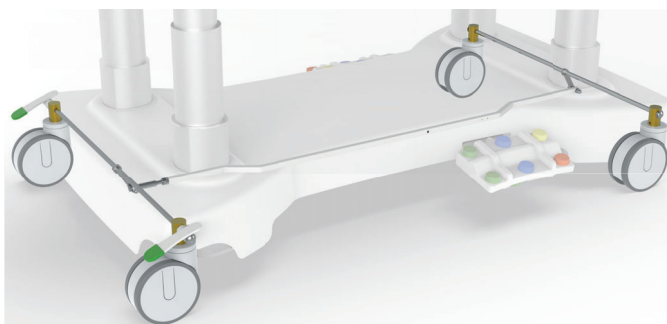

Pacientský satelitní ovladač

Ovladač se pohybuje s ložnou plochou a je tak pacientovi stále snadno dostupný v jakékoliv pozici. Ovladač je dostupný ve dvou grafických provedení.

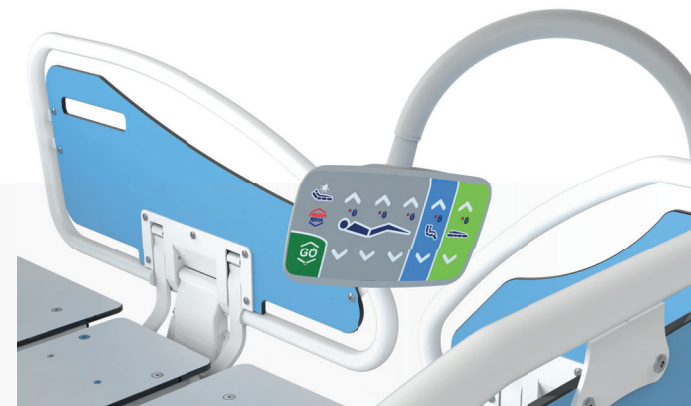

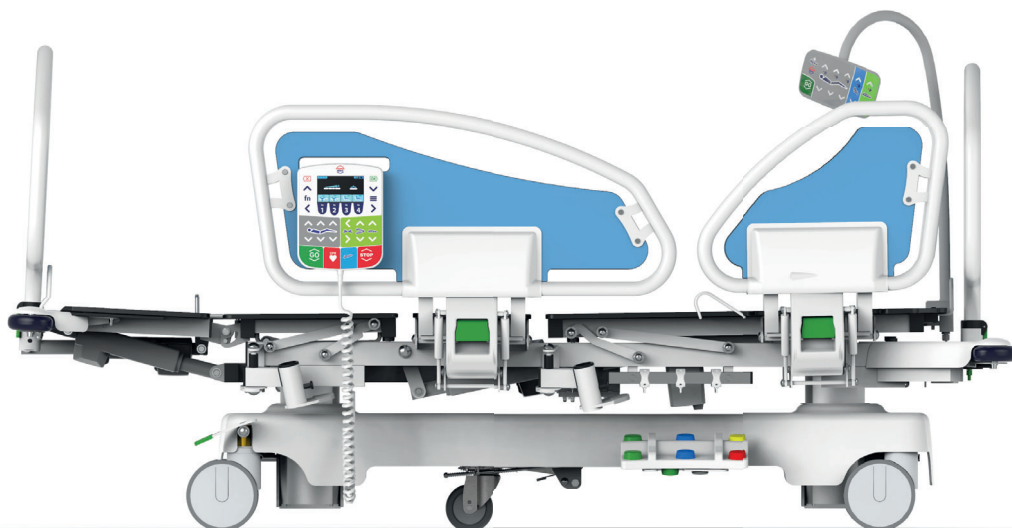

Technické parametry

Konstrukce lůžka	Čtyřsloupová
Vnější rozměry (d x š)	222 x 108 (128) cm
Rozměry matrace (d x š)	200 x 100 (120) cm
Výška ložné plochy	45 - 85 cm
Autoregrese zádový díl	12 cm
Autoregrese stehenní díl	6 cm
Prodloužení ložné plochy	+ 10 cm
Hmotnost	243 (264) kg
Bezpečné provozní zatížení	500 kg
Maximální hmotnost pacienta	435 kg
Lůžko je určeno pro aplikační prostředí	1, 2, 3
Ložná plocha	HPL
Trendelenburg / Antitrendelenburg	14°/14°
Laterální náklon	15°/15° elektrický
Maximální úhel zádového dílu	72°
Maximální úhel stehenního dílu	35°
Maximální úhel lýtkového dílu	26°

Výbava lůžka

Kolečka	TENTE, 150 mm
Centrální brzda	Ano
5. kolečko	Ano
Eurolišta	Ano 2x
Plastové háčky na eurolištu	Ano 6x
RTG zádový díl	Ano
Držák RTG kazety	Ano
Rozměr držáku RTG kazety	40 x 49 cm
CPR	Ano (elektrické)
Materiál ložné plochy	HPL
Záložní baterie	Ano
Svorka pro vyrovnání el. pot.	Ano
Nárazová kolečka	Ano
Podsvícení podvozku	Ano
Aretace čel	Ano
Kryt podvozku	Ano
Alarm odbrzděného lůžka	Ano

Vážicí systém lůžka (TITAN PRO)

Maximální váživost	500 kg
Minimální váživost	10 kg
Přesnost vážení v absolutním režimu	± 0,5 kg
Přesnost vážení v diferenc. režimu	± 0,5 kg
Rozsah mrtvé hmotnosti	0 - 300 kg
Signalizace úniku pacienta	Ano
Zmražení hodnoty	Ano
Ukládání hodnot	Ano
Třída krytí	IP54
Displej	Grafický LCD displej

Matrace

Doporučený rozměr (d x š)	200 x 100 (120) cm
Doporučená tloušťka při normálním použití	15 cm
Doporučená minimální tloušťka	15 cm
Doporučená maximální tloušťka	22 cm

