



decu[®] bariatric

šířka 100/120 cm

nosnost 450 kg

výška 12 cm




IV. stupeň dekubitů

hybridní



Dynamická hybridní antidekubitní matrace

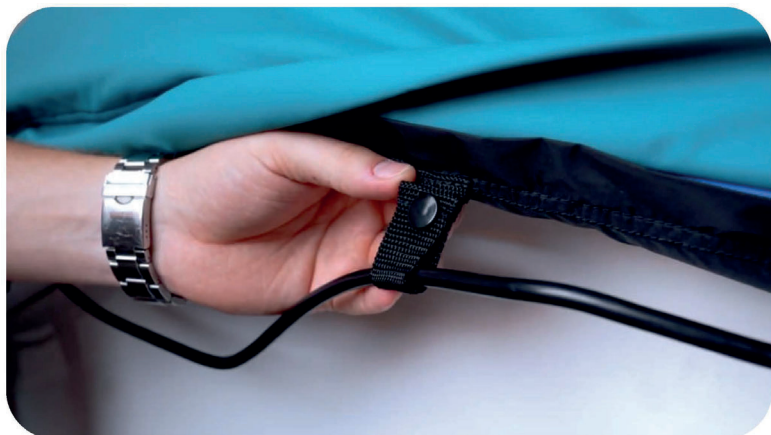

Inovativní hybridní systém vzduch-pěna kombinující pasivní a aktivní matraci v jedné (náhradní matraci). Systém s extrémně nízkým provozním tlakem pro maximální prevenci a terapeutickou podporu dekubitů až do IV. stupně včetně (velmi vysoké riziko) a pro výrazně prodlouženou životnost kompresoru. Matrace se skládá z 10 plochých buněk, které umožňují rozložení hmotnosti pacienta (max. 450 kg) na velkou plochu, čímž se snižuje tlak na kůži. Jedna buňka pod hlavou má funkci polštáře a 3 buňky mají mikroventilační systém. S maximální výškou pouhých 12 cm zůstává funkce bočnic zachována, čímž se eliminuje riziko pádu pacienta z postele. Integrovaná pasivní matrace s možností použití bez počátečního nafouknutí výrazně zjednodušuje akutní příjem pacienta. Zesílené okraje usnadňují pacientovi vstávání a slouží také jako opora pro sestru při péči o pacienta. Matrace je k dispozici ve dvou šířkách 100 nebo 120 cm. Poloautomatický kompresor s automatickým nastavením tlaku dle hmotnosti pacienta.

MATRACE

- 3 komory pod trupem s funkcí mikroventilace pro snížení tepla a vlhkosti
- Obousměrně strečový, voděodolný, prodyšný, nehořlavý potah
- Snadná údržba - pratelný do 95 °C
- Zip 360° s ochrannou klopou po obvodu, která snižuje riziko kontaminace
- Integrovaný systém upevnění napájecího kabelu
- 6 popruhů pro snadné upevnění matrace k posteli
- Rychloupínací CPR ventil pro akutní resuscitaci
- Zesílené okraje pro snadné vstávání
- QR - bezpečnostní rychloupínací konektory pro snadné odpojení komor a dosažení nulového tlaku ve vysoce rizikových oblastech pro snížení rizika proleženin - 2 / 10 kusů (volitelně)
- Zvýšená ochrana hadice (volitelně)

KOMPRESOR

- Automatické nastavení tlaku podle zvolené hmotnosti pacienta
- Alternativní režim: APT - Režim terapie s alternativním tlakem A-8-C (5/10/20 min)
- Statický režim: CLP - Režim konstantního nízkého tlaku ve všech buňkách
- Režim automatického zpevnění: LMP - režim časově omezeného maximálního tlaku (30 minut)
- Převážný režim: TM - Převážný režim s funkcí paměti a snadným odpojením, neomezená doba přepravy
- Automatické zablokování tlačítek pro neúmyslné změny nastavení kompresoru
- Akustický a vizuální alarm: nízký tlak, výpadek proudu, servis
- AVS - Antivibrační systém pro redukci vibrací a tichý provoz (hluk < 23,8 dB)
- Systém START/STOP pro snížení spotřeby energie
- Funkce paměti pro uchování nastavených hodnot
- Integrovaný držák kompresoru

TECHNICKÉ PARAMETRY

Název	decu bariatric
Typ	hybridní matrace
Stádium dekubitů	II.- IV. (střední až velmi vysoká)
Generická skupina	dynamická antidekubitální hybridní matrace
Základ UDI-DI	8594218992DAHMF3
REF / GTIN (100 cm)	2-610-01 / 08594218996108
REF / GTIN (120 cm)	2-612-01 / 08594218996122
Rozměry balení	96 x 94 x 30 cm
Hmotnost balení	21 kg
Balení obsahuje	matraci s potahem, kompresor, uživatelskou příručku, přepravní tašku
Záruka	2 roky

MATRACE

Typ	náhradní matrace
Nosnost	450 kg
Výška	12 cm
Rozměr	100/120 x 200 cm
Počet buněk	10 ks - šířka 20 cm
Funkce polštáře	1 hlavová buňka bez střídání
Mikroventilace	3 buňky pod trupem
CPR ventil	uvolnění CPR ventilu - manuální
Další funkce	Integrované upevnění napájecího kabelu, 6 popruhů pro snadné upevnění k lůžku
Materiál	Polyurethan
Čištění	Termální dezinfekce
Hmotnost	12 kg
Potah	PU, obousměrně strečový, vodotěsný, prodyšný, nehořlavý, pratelný na 95°C, zip otočný 360° s klopou

KOMPRESOR

Typ	poloautomatický s LCD
Režimy	střídavý/statický/auto-firm/transport
Střídavý režim	3komorový systém výměny vzduchu A-B-C
Časový interval	5/10/20 minut
Alarm	akustický a vizuální
Typ alarmu	nízký tlak/výpadek napájení/servis
Zámek kláves	Automatický
Další funkce	paměť, Start/Stop, AVS
Hlučnost	<23,8 dB
Držák	integrovaný
Průtok	8 l/min
Provozní tlak	5-38 mmHg
Materiál	ABS pouzdro
Napájení	AC 230/120 V, 50/60 Hz, 7W
Napájecí kabel	5 m
IP	42
Provozní teplota	20-40 °C / 68-104 °F
Rozměry	17 x 26 x 12,5 cm
Hmotnost	3,4 kg

